

NATURAL THE ONE: revoluția în stratificarea ceramicii

O singura masa pentru orice exigență de stratificare



Tressis Italia este de zeci de ani o asociatie leader în domeniul dentar: prin noutatea tehnologica a cautat întotdeauna felul de a simplifica și de a ajuta arta tehnicodentara, promovand și propunand produse noi și de calitate.

Astazi Tressis Italia prezinta un sistem de ceramica absolut revolutionar pentru stratificarea ceramicii pe metal: **Natural The One**.

Prin folosirea unei singure mase ceramice translucide se pot realiza restaurari complete. Cu aceasta masa se poate acoperi toata gama a scarilor de culoare traditionale.

De acum înainte nu mai este nevoie de dentină, de smalt, de transparent etc. etc.

Natural The One este disponibil în 2 variante separate, pentru a se putea adapta la toate aliajele dentare din comerț, fie pretioase sau nepretioase. Sistemul se prezinta așa:

-The One HT pentru aliaje traditionale
(CTE 500° C 13,8-14,9)

-The One LF pentru aliaje cu nivel ridicat de expansiune (CTE 500°C 16,2-16,7) Este o singura masa pentru stratificarea tuturor culorilor; studiata pentru restaurari posterioare.

Natural The One este o metoda simpla, rapida, fidela și constanta în rezultatul final. Natural The One simplifica lucrul zilnic de laborator.

Simplitatea modului de întrebuintare permite realizarea rapida a ceramicii de buna calitate chiar și tehnicienilor mai puțin experti.

Sa facem un exemplu practic, în care trebuie să realizăm 3 elemente de culoare diferita, un A3, un B3 și un C3: după ce s-a întins opacul corespunzător la scara de culoare dorita, se va stratifica o unica masa pentru toate 3 elementele.

Economia de timp și material este evidenta!

Cu Natural The One îmbunatatiti timpul dumneavoastra în laborator.

Natural The One face parte din sistemul Natural Progressive Ceramic System care cuprinde ceramici de înalta (Natural HT) și joasa (Natural LF) temperatura pentru metal și zirconiu (Natural ZiR).

Cu gama de ceramica Natural se pot realiza incrustatii, fatete și coroane integrale presate și stratificate.

Sistemul de ceramica Natural permite presarea pastilelor de ceramica fie pe metal fie pe oxid de zirconiu cu aceleasi culori și același grad de opacitate. La ora actuala este cel mai complet sistem de ceramica italiana prezenta

DOMENIUL DE UTILIZARE

Folosirea ideala a acestei metode este în punți și elemente diatorice (posterioare) Fiind foarte usor de folosit Natural The One este avantajoasa fie pentru tehnicianul expert fie pentru cei la prima experienta. Numarul mic de mase necesare pentru lucru nu îngreuneaza cheltuielile laboratorului.

Procesul pentru a realiza restaurare în ceramica e foarte simplu:

1- pe capeta se întinde culoarea de opac dorit (fig.1)

2- se stratifica cu o singura masa dintele în forma lui definitiva (fig.2)

3- la final se coloreaza cu supercoloranti CHROMA STAINS sau CHROMA STAINS LIGHT pentru tonalitati mai deschise (fig.3)

4- astfel procedind, în puțin timp se obtine un rezultat realistic și de înalta calitate. (fig.4)

Tressis Italia s.r.l.
Viale Italia 194
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.418316
Fax. 0438.426450
info@tressis.it
www.tressis.it

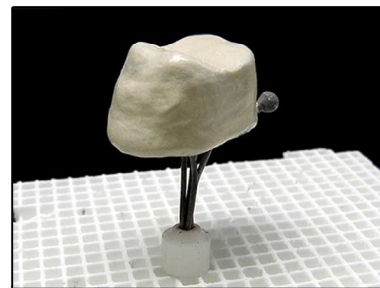


fig. 1

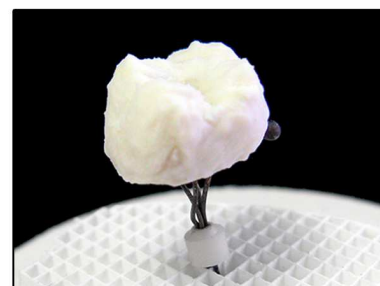


fig. 2

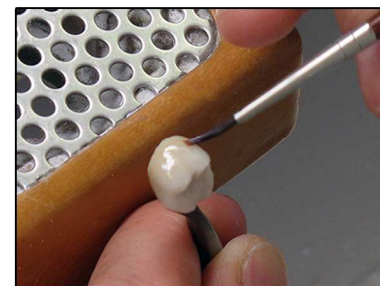


fig. 3

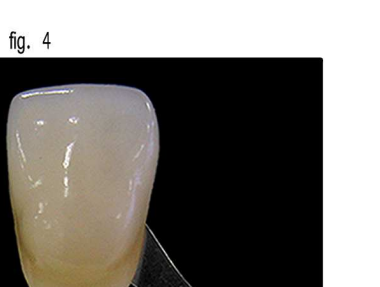


fig. 4

Compozitia sistemului Natural The One

Colorazione A - D	A0	A1	A2	A3	A3,5	A4	A5	B0	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
OPAQUE PASTE	A0	A1	A2	A3	A3,5	A4	A5	B0	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
THE ONE	1	1	2	3	3	3	3	1	1	2	3	3	1	3	3	3	1	2	2
STAINS		A light	A light	A light	A	A	A		B light	B light	B	B	C light	C light	C light	C light	D light	D light	D light

PENTRU COMENZI SI INFORMATII IN ROMANIA CONTACTATI

GROZA ROBERT

alba-iulia .jud alba tel 0040/758308633 email: robert_cr2003@yahoo.it